

ディスポ清拭が、手間要らず、さらに使い易く。

清潔!

簡単!

ローコスト!

Purge-3

ディスポタイプ保温清拭車

Y S - W - P 3 R

Purge-3[®]

独自の!
新発想



簡単・清潔のディスポ清拭を、ローコ

使い捨てだからこそ得られる、数々のメリット。

時代が清潔を、社会環境がさらに院内感染対策を要求する医療環境。
病院や老人保健施設での清拭業務にも、
関わるすべての立場から喜ばれることが望めます。
ディスポタイプの保温清拭車Purge-3は、そんな時代の声を背に開発された、
世界でたったひとつのディスポタイプの清拭車なのです。



カット性がアップ

清拭ロールにはミシン目が入っていますが、さらにカット性をアップさせるために、上ブタにハサミ型のフックを設けました。



看護師の立場から



使う人だって嬉しい!

- 院内清潔度アップ
ディスポなので毎回新しいタオル。何がしかの污染を受けたとしても、毎回使い切りなので影響を受けません。
- タオル準備の手間から解放
従来のタオルで大きく掛かっていた、洗浄・滅菌などの作業負担や、滅菌業者へのコスト負担から解放されます。従って、本来の業務であるリスクマネジメントにも注力することができます。
- 使い方がいって簡単
ウェットティッシュの要領で、1枚ずつ上に引っ張り出すだけ。誰でもすぐに使いこなせるのも嬉しい機構です。

患者の立場から



使われる人も嬉しい!

- 毎回、まっさらが気持ちいい
使い捨てで毎回まっさら。自分だけに使われるタオルなので、従来のように、他人のどこを拭いたかわからないという不快感とは無縁です。
- 肌にも優しい素材を使用
しっかり拭えるコットン100%の不織布をご用意。とても柔らかな触感が優しい拭き心地を提供します。
- タオルと同等の保温性を確保
清拭布(不織布)は2つ折で加工しており、パイル地のタオルが持つ優れた保温性と同等レベルを確保しています。

関わるすべての立場で嬉しい清拭を実現!

ストで!! *Purge-3*®が実現します!

缶体のみベッドサイドに置くことも可能です。

ヒーター付の缶体をカートから取り外して、ベッドサイドに置くこともできるので、様々な運用にも対応できます。また、缶体内の残水処理や洗浄なども容易に行えるので、お手入れの面でも楽にお使いいただけます。



ディスポ清拭を実現するための工夫の数々です。

1

丈夫で衛生的なディスポタオル



衛生的なコットン100%の不織布は、十分な強度とともに、吸水性・保温性を兼ね備えています。ディスポタイプですから、清拭後のタオルの洗浄・滅菌が不要で、看護師の手間を削減、外注の滅菌業者コスト負担を解消します。

2

ワンタッチの簡単操作

■コントロールパネル




缶体に専用の清拭タオルを入れて給水後、温度設定を行い、運転スイッチを押すだけ。あとは全自動で、加熱・蒸し上がり・保温の工程順に運転する、簡単な操作性を実現しています。

3

3つの温度設定と運転予約

■温度折れ線グラフ(例)

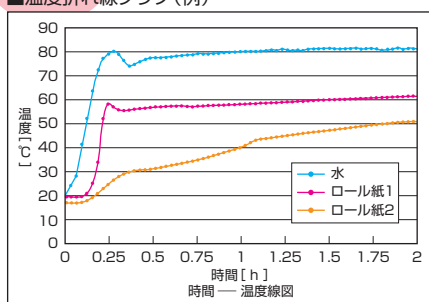

季節や好みに応じて、80°C・70°C・60°Cの3つから設定温度が選べます。また、運転予約機能を用いることで、翌日分などの自動運転を予約しておくことも可能です。(PAT.P)

※ロール紙1は、ロールの芯から1枚目部分

※ロール紙2は、ロールの芯から約3cm外の部分

※水温等の上昇は、器械に注入した水の温度等に左右されます。

仕様

YS-W-P3R

品名	ユヤマ保温清拭車（ディスクタイプ）Purge-3
型式	YS-W-P3R
合体寸法	670mm(W)×430mm(D)×900mm(H)（本体+缶体+カート）
設定温度	60℃・70℃・80℃
運転予約	1時間後から24時間後の範囲で、1時間毎に設定可能
缶体	PP樹脂、ステンレス 内径φ210mm×214.5mm(H) ロールタオル1巻収納
本体外装	PP樹脂・ABS樹脂
カート	鉄パイプ製 クロームメッキ仕上げ
安全装置	過電流防止スイッチ、過熱防止スイッチ、缶体有無スイッチ
附属品	スノコ、計量カップ、カゴ
電源	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	750W
本体質量	約18.3kg（乾燥質量）

外形寸法（単位はmm）



清拭ロール（消耗品）



330mm×200mm/枚,150枚/巻
 ※コットン100%の清拭布は自然由来の素材なので、一般燃焼却物としての廃棄が可能です。



※キャスターは4輪とも操舵方向を変えられるので、ベッドサイドでのカート操作も実にスムーズです。



YUYAMAのSDGsへの取り組み
 これまでも、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、持続可能な社会実現を目指し、これからも活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。



Your Partner in Medication



製造元
株式会社

湯山製作所

発売元
株式会社



大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
 TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
 東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
 TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2021年4月現在のものです。
 製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
 活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!
 「開局でお手伝いできること」
 「無菌製剤室を作ろう!」



JQA-QM5424
 (株)湯山製作所